

LOGO

Luxus-Massagegerät

BEDIENUNGSANLEITUNG



Technische Spezifikation

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie die Anwendung nutzen.

An den Benutzer

Liebe Nutzer,

Hallo! Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Um die korrekte Funktion des intelligenten Luxus-Massagegeräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Drücken Sie die Massagetaste und nutzen Sie die volle Leistung des Geräts.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

KATALOG

1. Überblick

2. Sicherheitsrichtlinien

3. Gewährleistungsbefugnis

4. Produktzusammensetzung

5. Produkteigenschaften und Nutzungsabsicht

6. Verfahren und Anweisungen

7. Produktspezifikationen

8. Fehlerbehebung

9. Produktwartung

10. Verpackung und Zubehör

1. Überblick

Das Luxus-Massagegerät basiert auf traditioneller Medizin, Meridianlehre, Magnetfeldtherapie und der Fußreflexzonenmassage und integriert moderne elektronische Technologie und medizinische Errungenschaften.

2. Sicherheitsrichtlinien

a) Beschreibung wichtiger Sicherheitsaspekte

- Um eine sichere und korrekte Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt unbedingt gemäß dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produktzweck.
- Ziehen Sie nach Gebrauch oder vor der Reinigung des Produkts den Netzstecker aus der Steckdose.
- Die Wärmefunktion sollte mit Vorsicht verwendet werden, um schwere Verbrennungen zu vermeiden. Nicht auf unempfindlicher oder überempfindlicher Haut oder in Bereichen mit schlechter Durchblutung anwenden. Kinder und Menschen mit Behinderungen dürfen die Heizfunktion nicht selbstständig benutzen. Unsachgemäße Bedienung kann gefährlich sein.
- Um versehentliche Brände, Stromschläge oder Verletzungen durch Überhitzung zu vermeiden, betreiben Sie das Produkt nicht unter einem Kissen oder einer Decke.
- Während des Gebrauchs nicht abdecken, da die Motortemperatur sonst zu hoch wird und es zu Ausfällen oder Schäden kommen kann.
- Wenn das Produkt von Kindern oder Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen verwendet wird oder sich in deren Nähe befindet, muss eine Aufsichtsperson anwesend sein, die für deren Sicherheit verantwortlich ist.
- Sollten Sie sich während der Massage unwohl fühlen, brechen Sie die Massage bitte sofort ab.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt, der Betrieb ist anormal, das Produkt ist zu Boden gefallen oder beschädigt worden, es ist in Wasser gefallen. Wenden Sie sich in diesen Fällen bitte an das Wartungszentrum zur Überprüfung und Reparatur.
- Verwenden Sie keine Teile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Produkts ein und lassen Sie sie nicht hineinfallen.

- Um die Stromzufuhr zu unterbrechen, schalten Sie alle Bedienelemente aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Dieses Produkt ist nicht zur Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung geeignet. Falls eine Diagnose oder Behandlung erforderlich ist, sollte diese von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden.

b) Nutzungsumgebung

- Um Funktionsstörungen zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter oder staubiger Umgebung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Raumtemperaturen über 40 °C.
- Stellen Sie das Produkt nicht im Freien auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Elektroheizungen, Herden oder in direktes Sonnenlicht.

C) Für Benutzer, für die dieses Produkt nicht geeignet ist

Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie an einer der folgenden Erkrankungen leiden.

- Sich in ärztlicher Behandlung befinden oder sich unwohl fühlen.

● Leiden an bösartigen Tumoren.

- Verwendung von Herzschrittmachern oder Implantaten.
- An einer akuten Krankheit leiden.

D) Vorsichtsmaßnahmen beim Umschalten

- Bedienen Sie den Steuerschalter nicht mit nassen Händen. Achten Sie darauf, dass der Steuerschalter nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Schlafen Sie während der Bedienung des Produkts nicht ein.
- Dieses Produkt darf nicht im betrunkenen oder kranken Zustand verwendet werden.

● Halten Sie den Massagekopf nicht direkt in die Nähe von Händen, Hand- und Fußgelenken, Knien, Brust oder Bauch.

● Verwenden Sie dieses Produkt nicht länger als 30 Minuten am Stück.

● Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Stoffbezug beschädigt ist.

- Um unerwünschte Wirkungen zu vermeiden, sollte das Produkt nicht innerhalb einer Stunde vor oder nach dem Essen angewendet werden.


● Bei Verwendung des Produkts bei niedriger Raumtemperatur sollte die Wärmefunktion nicht abrupt aktiviert werden. Es wird empfohlen, die Temperatur vor der ersten Benutzung schrittweise auf den normalen Bereich einzustellen.

Wird das Produkt von einem kühlen Lagerort in eine warme Umgebung verbracht, kann dies aufgrund von Kondenswasserbildung in den Bauteilen die normale Funktion beeinträchtigen und sogar zu einem Geräteausfall führen. Es wird empfohlen, das Produkt vor der ersten Benutzung eine Stunde lang bei normaler Raumtemperatur lagern zu lassen.

3. Gewährleistungsbefugnis

- 1) Diese Garantieberechtigung ist nicht übertragbar.
- 2) Ab Kaufdatum kann der Benutzer während der Garantiezeit eine kostenlose Garantie in Anspruch nehmen (Äußerlichkeiten sind von der Garantie ausgeschlossen).
- 3) Für dieses Produkt gilt eine einjährige Garantie.
- 4) Bitte legen Sie bei Inanspruchnahme der Garantieleistung den Original-Kaufbeleg und die Garantiekarte vor.
- 5) Die Kaufzeit ist abhängig von den am Schalter ausgestellten gültigen Dokumenten.
- 6) Diese Garantie gilt nicht für Leasing-, Handels-, gewerbliche, institutionelle und sonstige private Nutzer.
- 7) Die folgenden Bedingungen fallen nicht unter die Garantie, sondern nur unter die kostenpflichtige Wartung (Kosten für Arbeitsleistung und Material).
 - a) Alle vom Menschen verursachten Schäden, einschließlich Schäden durch anormale Arbeitsbedingungen, nicht vorschriftsmäßige Verwendung und Lagerung sowie Schäden durch unsachgemäße Verwendung;
 - b) Benutzer zerlegen, reparieren oder modifizieren die Maschine ohne Genehmigung des Unternehmens oder Dritte zerlegen, modifizieren oder reparieren die Maschine ohne Genehmigung des Unternehmens;
 - c) Schäden, die durch unsachgemäßen Transport nach dem Kauf verursacht wurden;
 - d) Schäden, die durch andere höhere Gewalt (wie Überschwemmung, Feuer, Blitzschlag und Erdbeben) verursacht werden.

4. Produktzusammensetzung

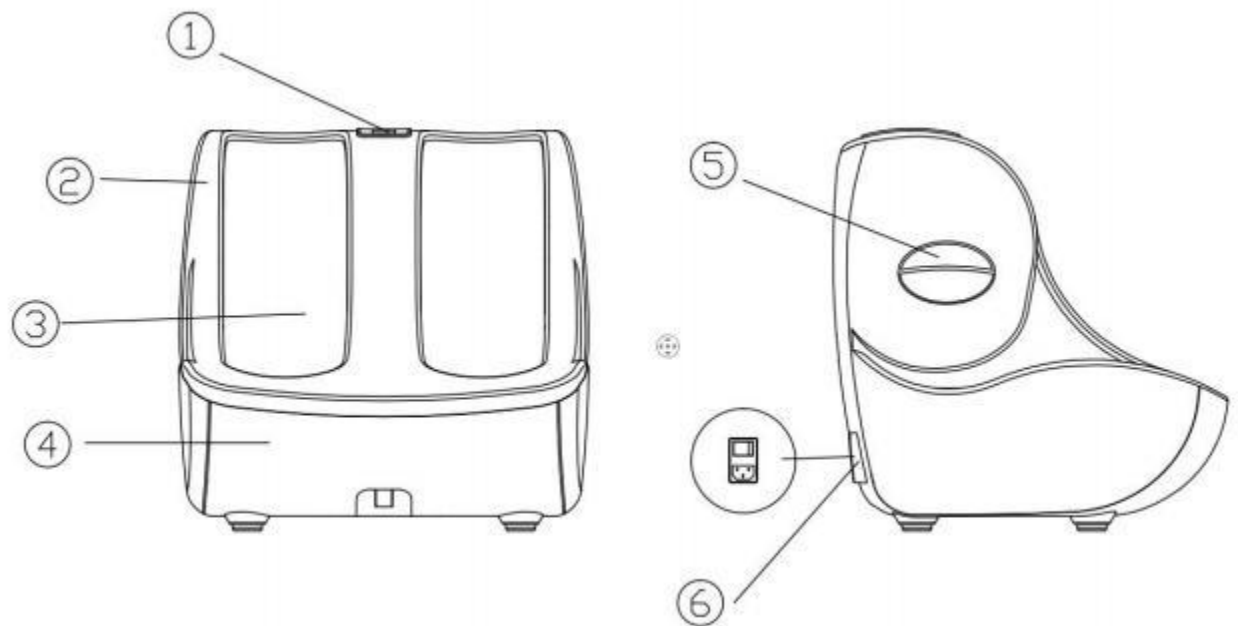

(1) Zentrale Oberfläche: Computerbedienfeld – zur Steuerung der Massagefunktion des Produkts

(2) Vorderseite oben innen: Knetrolle + Massagebrett – zur Akupunkturpunktmassage an Rücken und Beinseiten (3)

Vorderseite: Stoffbezug (mit Reißverschluss) – abnehmbar und waschbar

(4) Vorderseite unten innen: Knetrolle + Massageplatte + Vibrationsfunktion
- - um eine multifunktionale Akupunkturmassage der Füße und des Sprunggelenkbereichs zu erreichen

(5) Beide Seiten der Oberfläche: Griff – erleichtert das Bewegen des Produkts

(6) Rechte Seite hinten: Netzschalter – Netzkabel kann separat abgenommen werden

5. Produkteigenschaften und Nutzungsabsicht

Produktmerkmale

1. Kann die Muskeln der Beine und Füße entspannen;
2. Kann Akupunkturpunkte stimulieren und Müdigkeit beseitigen;
3. Kann die Durchblutung fördern;
4. Kann Nerven beruhigen und Druck lindern;
5. Kann Beinschmerzen beseitigen;
6. Kann die perfekte Kurve der Beine wiederherstellen;
7. Abnehmbarer und waschbarer Stoffbezug, damit er immer sauber bleibt.
8. Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen mit einer Hitzeallergie sollten bei der Benutzung vorsichtig sein.

Verwendung des Schaltplans



schematische Darstellung

6. Verfahren und Anweisungen



1. Schalter: Betrieb starten oder Betrieb stoppen;
2. Füße: Fußmassagefunktion ein/aus;
3. Beine: Beinmassagefunktion ein/aus;
4. Heizung: Die Heizfunktion ist beim Einschalten des Geräts standardmäßig deaktiviert. Durch Drücken der Heiztaste wird die Heizfunktion aktiviert; die Displayanzeige leuchtet auf. Durch erneutes Drücken der Heiztaste wird die Heizfunktion deaktiviert; die Displayanzeige erlischt.
5. Intensität: Die Häufigkeit der Massage kann verändert werden;
6. Vibration: Die Vibrationsfunktion ist beim Einschalten des Produkts standardmäßig deaktiviert. Durch Drücken der Vibrationstaste wird die Vibrationsfunktion aktiviert und die Displaybeleuchtung leuchtet auf. Durch erneutes Drücken der Vibrationstaste wird die Vibrationsfunktion deaktiviert; die Displaybeleuchtung bleibt aus.
7. Zeit: Die Massagezeit kontrollieren;

Steuerungs-/Bedienungsanleitung

1. Schalter: Drücken Sie die Taste „Öffnen“, um das automatische Programm zu starten; Beine und Füße werden standardmäßig aktiviert, Vibration und Heizung sind standardmäßig deaktiviert, die Massagezeit beträgt standardmäßig 15 Minuten; drücken Sie anschließend die Taste „Ein“, um die Maschine auszuschalten;
2. Füße: Drücken Sie, um das automatische Programm zu beenden, die Tastenbeleuchtung erlischt und die Fußmassage wird beendet; Drücken Sie erneut, um die Tastenbeleuchtung für die Fußmassage wieder einzuschalten;
3. Bein: Drücken Sie, um das automatische Programm zu beenden, die Tastenbeleuchtung erlischt und die Beinmassage wird beendet; Drücken Sie erneut, um die Fußmassage wieder einzuschalten;
4. Zeit: Die Standardbetriebszeit der Maschine beträgt 15 Minuten. Durch einmaliges Drücken der Zeittaste wird die Betriebszeit auf 20 Minuten erhöht. Durch erneutes Drücken der Zeittaste wird die Betriebszeit auf 25 Minuten erhöht.
5. Intensität: Drücken Sie die Intensitätstaste, um in den Intensitätsmodus zu wechseln. Die Rollengeschwindigkeit erhöht sich, die Intensität ist in 3 Stufen unterteilt. Die Digitalanzeige zeigt H1, H2, H3 an, gefolgt von der entsprechenden Massageintensität.
6. Heizung: Die Fußsohlenheizung ist beim Einschalten des Produkts standardmäßig deaktiviert. Drücken Sie die Heiztaste, um die Heizfunktion zu aktivieren. Die Anzeige leuchtet dann auf.
7. Vibration: Drücken Sie die Taste, um die Vibrationsfunktion zu aktivieren. Durch erneutes Drücken erlischt die Tastenbeleuchtung und die Vibration wird deaktiviert.

7. Product specifications

Product Name	Foot Massage Device
Nominal Voltage	AC~220V
Rated Power	130W
Product Size	465*480*470
Package Size	520*535*530
Executive Standard	GB4706.1-2005
	GB4706.10-2008
Time Alarm	15 minutes

8. Trouble removal

If you encounter problems with this product, please refer to the following tips and possible solutions. If the product is still in the fault state, please send the product to the service center or authorized technical personnel for inspection and repair.

Abnormal Condition	Possible Cause	Handling Methods
Not working	1. Without electricity 2. The function key is not on	1. Connect the power supply or check whether the power supply is properly connected 2. Turn on/off button
Suddenly stop operation	1. Power off 2. Massage for more than 15 minutes 3. Continuous use time is too long, product overheating protection 4. Apply too much force and the massage ball is blocked	1. Check whether the power interface is properly connected 2. Restart the on/Off button 3. Turn on/off button again after cooling 4. Restart the on/off button

9. Produktwartung

a) Lagerung

Wenn das Produkt nicht verwendet wird, legen Sie es in eine Farbbox und bewahren Sie es an einem sicheren, trockenen, gut belüfteten und kühlen Ort auf.

Das Schaltnetzteil und die Kabel dürfen nicht geknickt werden. Verwenden Sie keine Hängevorrichtungen für das Schaltnetzteil und die Kabel. Vermeiden Sie Kratzer an der Produktoberfläche durch scharfe Gegenstände.

Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus. b)

Reinigen

Vor der Reinigung den Hauptschalter ausschalten und den Netzstecker ziehen. Die Oberfläche des Produkts mit einem trockenen Tuch reinigen.

Verwenden Sie zum Aufhängen der Produkte kein Schaltnetzteil und kein Kabel.

Vorsicht!

Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine ätzenden Reinigungsmittel wie Benzol oder Klärmittel.

c) Wartung

Halten Sie das Produkt sauber und bewahren Sie es fern von Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, decken Sie es bitte mit einer Staubschutzhülle (separat erhältlich) ab, um es vor Staub zu schützen.

10. Verpackung und Zubehör

Verpackung im Wellpappkarton, 1 Massagegerät, 1 Bedienungsanleitung, 1 Zertifikat, 1 Produktgarantie, 1 Netzkabel

Firmenname: Fuxinkang Technology Co., LTD. Adresse: Nr. 7 Qunbang Road, Yongkang, Jinhua, Provinz Zhejiang